


ANAL COLLECTION INSTRUCTIONS

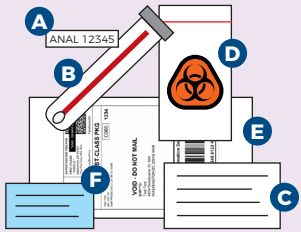


Included in this kit

- A** Self-adhesive order number label
- B** Collection tube with swab
- C** Lab Test Requisition Form
- D** Zip closure biohazard bag
- E** Postage-paid return envelope
- F** Instructions for results

IMPORTANT: Read all instructions prior to collecting your sample

- For best results, avoid anal or vaginal intercourse for 48 hours prior to collecting your sample
- Be sure to wash and dry your hands thoroughly, before and after collection

START HERE

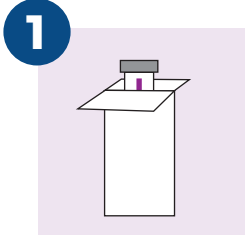

Peel open the package and remove the swab and transport tube.

Twist the cap to break the seal, then remove the cap and attached swab without touching the soft tip of the swab.


! Do not lay the swab down.



Moisten the swab with a few drops of clean water.

Stand in a relaxed, balanced position with your leg up on a chair or toilet.


Hold the collection swab in your dominant hand, about 2-3" from the soft tip. Use your opposite hand to raise your buttock on that side, exposing your anus.

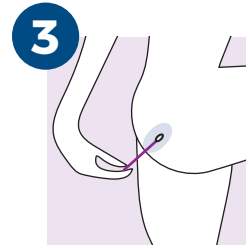


Carefully insert the soft tip about 2" into the anus. Note: there is a slight indentation on the handle, 2" from the soft tip.

Once inserted, use gentle pressure to rotate the swab against the anus in a circular motion for 20 seconds.

Then continue to rotate the swab against the anus as you slowly remove it from the anus.

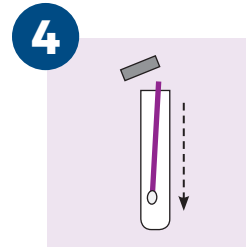


Immediately place swab into the transport tube and cap the tube securely.

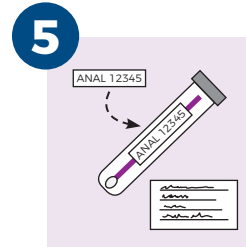

Place the self-adhesive label with your order number on the clear-capped tube. Complete the Lab Test Requisition Form with your name, date of birth, gender, and collection date and time.

! If you are testing multiple parts of your body, ensure that you are placing the correct label on each tube. The labels are letter-coded and marked to correspond with the part of your body being tested.

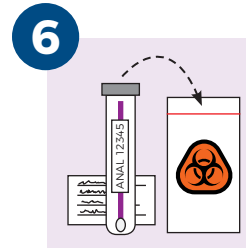

Tightly seal the labeled transport tube and Lab Test Requisition Form in the zip closure **ORANGE BIOHAZARD BAG** with absorbent, then place bag into clear plastic bag and then into postage paid mailer and seal tightly.

! If any of these steps are missed or not preformed correctly, specimens will be discarded and no results will be provided.




You can send your sample from your mailbox or any United States Post Office.

! Do not place in a FedEx or UPS drop box

To receive your results, log into your My SNHD account at www.snhd.info/c2p 7-10 business days after mailing the collection kit. If you receive a phone call, email, or text from a Southern Nevada Health District staff person, it is very important for you to respond. Results will not be mailed at this current time.

INSTRUCCIONES DE RECOLECCIÓN ANAL

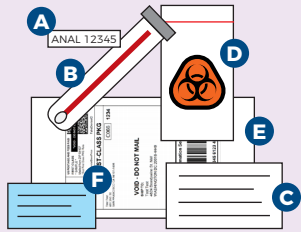

Incluido en este paquete


- A Etiqueta autoadhesiva con el número de orden
- B Tubo de recolección con hisopo
- C Formulario de Requisición del Laboratorio de Pruebas
- D Bolsa para riesgo biológico con cierre de zíper
- E Sobre con estampilla prepagada
- F Instrucciones para los resultados

IMPORTANTE:
Lea todas las instrucciones antes de recolectar su muestra

- Para obtener mejores resultados, evite tener relaciones sexuales anales o vaginales 48 horas antes de recolectar su muestra
- Asegúrese de lavar y secar muy bien las manos, antes y después de la recolección

COMIENCE AQUÍ

1

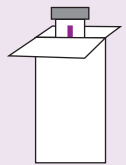

Abra el paquete y retire el hisopo y el tubo de transporte.

Gire la tapa para romper el sello, después retire la tapa y el hisopo sin tocar la punta suave del hisopo.

! No ponga el hisopo sobre una superficie plana.

2




Humedezca el hisopo con algunas gotas de agua limpia.

Párese en una posición relajada y balanceada colocando la pierna sobre una silla o sobre el inodoro.

Sostenga el hisopo de recolección con la mano dominante, aproximadamente de 2 a 3 pulgadas de la punta suave. Utilice su mano opuesta para levantar el glúteo hacia un lado, exponiendo su ano.

3

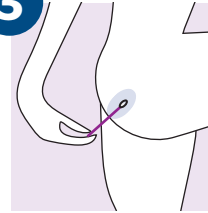


Con cuidado inserte la punta suave del hisopo aproximadamente 2" dentro del ano. Nota: hay una leve hendidura en el mango, a 2" de la punta suave.

Una vez insertado, utilice poca presión para girar el hisopo contra el ano en un movimiento circular por 20 segundos.


Después, continúe rotando el hisopo contra el ano mientras lo retira lentamente del ano. slowly remove it from the anus.

4

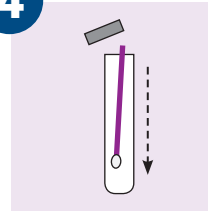

Coloque inmediatamente el hisopo dentro del tubo de transporte y cierre la tapa muy bien.


5

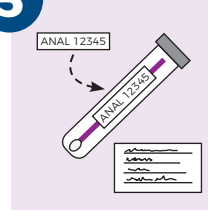

Coloque la etiqueta autoadhesiva con su número de orden en el tubo transparente tapado. Complete el Formulario de Solicitud de Prueba de Laboratorio con su nombre, fecha de nacimiento, sexo y fecha y hora de recolección.

! Si está recolectando muestras de partes múltiples del cuerpo, asegúrese de que está colocando la etiqueta correcta en cada tubo. Las etiquetas están codificadas con letras y marcadas para corresponder a la parte del cuerpo de donde la muestra se está recolectando.

6

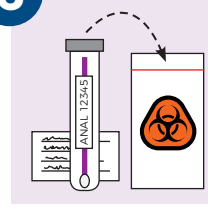

Coloque el tubo transparente con la etiqueta y el Formulario de Solicitud de Prueba de Laboratorio en la **BOLSA NARANJA PARA RIESGO BIOLÓGICO** con absorbente, sellándola muy bien, después, colóquela dentro de la bolsa plástica transparente y después, dentro del sobre de envío prepagado y séllelo todo muy bien.

! Si cualesquiera de estos pasos se omiten, o no se llevan a cabo correctamente, las muestras serán descartadas y no habrá resultados que proveer.

7



Usted puede mandar su muestra desde el buzón de correo de su casa, o desde cualquier Oficina Postal de los Estados Unidos.

! No coloque su muestra en un buzón de FedEx o UPS.

Para recibir los resultados, ingrese en su cuenta "My SNHD" en: www.snhd.info/c2p de 7 a diez días después de haber enviado el kit de recolección. Si recibe una llamada telefónica, correo electrónico o mensaje de texto de un miembro del personal del Distrito de Salud del Sur de Nevada, es muy importante que responda. Los resultados en estos momentos no se enviarán por correo.